

5. Navodila za namestitev in uporabo

5.1 Namestitev ali zamenjava baterije

Ta naprava uporablja dve alkalni bateriji št. 7 (AAA). Potisnite pokrov baterije proti spodaj natančno preverite pozitivne in negativne oznake na pokrovu baterije, vstavite popravite baterije glede na oznake in jih nato napolnite. Priporočamo, da baterije odstranite, če jih uporabljate dlje časa (nad 1 mesecem).

5.2 Nastavitve

1. Tipka za merjenje: usmerite se v predmet, ki ga želite preizkusiti, in pritisnite za zagon meritve
2. Gumb za vklop / izklop osvetlitve ozadja: Kliknite za vklop / izklopite osvetlitev ozadja, pridržite, da vklopite način merjenja, in nato merjenje telesne temperature.
3. Gumb za vklop / izklop zvoka: kliknite za vklop / izklop zvoka, in pritisnite in držite za preklap med Celzijem in Fahrenheitom.
4. Tipka za odpiranje: Preverite zgodovinske podatke
5. Gumb gor: Preverite zgodovinske podatke

5.3 Merjenje telesne temperature

Termometer postavite na sredino čela in ga držite pokonci in ga držite na daljavo od 1-5 cm od čela.

Pritisnite gumb zaklopa, da se rezultat prikaže na zaslonu v 2 sekundah.

a) Privzeti je način telesne temperature. Če se spremenite pred meritvijo se morate vrniti v fizični način temperatura. Po nastavitvi se prikaže zaslon "👤".

b) Pritisnite gumb za vklop in vklopite avtomatsko merjenje temperature

c) Brez kakršnega koli delovanja se bo naprava s amodejno izklopila v 10 sekundah, da prihrani energijo.

d) Merilno območje ne sme biti pokrito z dlakami ali zamašitev in ne sme biti niti znoja niti kapljic vode.

e) Pred merjenjem se izogibajte kopanju ali naporni vadbi.

f) Priporočljivo je, da vsakič sprejmete 3 ukrepe. Če merimo vrednost drugačna, izberite vrednost z najvišjo temperaturo.

g) Izmerjeni rezultat te naprave ne nadomešča zdravnikove diagnoze, temveč samo za referenco.



① Metoda merjenja (Objekt 📦/ telo 👤)

② Spomin


③ Temperaturne enote (° C / ° F)

④ Podatki o temperaturi

⑤ Opozorilo o telesni temperaturi (Normalno / vročina)

⑥ Vrednost baterije

⑦ Stanje zvoka (vklop / izklop)

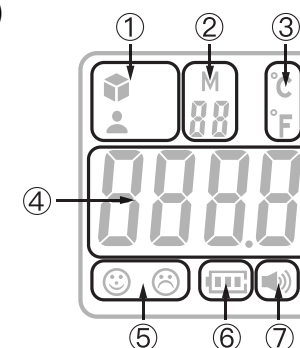

5.4 Merjenje površinske temperature

Pred merjenjem spremenite način "Temperatura površine predmeta".

Po nastavitvi se prikaže zaslon "📦". Naj bo razdalja 1-5 cm od površino predmeta in držite navpično. Pritisnite gumb zaklopa za merjenje in rezultat bo prikaže na zaslonu v 2 sekundah. Brez kakršnega koli dela se bo naprava samodejno izklopila v 10 sekundah, da prihrani energijo.

5.5 Preverjanje preteklih podatkov

V načinu merjenja pritisnite levo in desno izbirno tipko, da prikažete zgodovinske zapise. Če ni nobenega zapisa, se številke ne prikažejo. Do 32 podatkovnih skupin bodo podatki ciklični predpiše.

6. Kontraindikacije, previdnostni ukrepi, opozorila in nasveti

6.1 Kontraindikacije: Jih ni

6.2 Varnostni ukrepi

- (1) Ta izdelek v bistvu ne vsebuje elektromagnetnega sevanja in je v skladu z njim trenutni mednarodni standardi elektromagnetnega sevanja. Do dosegljivosti elektromagnetne motnje druge opreme na izdelku in nanje vplivali rezultati preskusov, se izogibajte elektronski opremi, kot je mobilna telefoni in indukcijske peči.
- (2) Pred uporabo natančno preberite navodila in preverite, ali je akumulator pravilno nabor.
- (3) Izogibajte se potopitvi naprave v tekočino in je prepovedano izpostaviti dlje časa visoke ali nizke temperature.

5. Uputa za ugradnju i uporabu

5.1 Instalacija ili zamjena baterije

Ovaj uređaj koristi dvije alkalne baterije br. 7 (AAA). Gurnite poklopac baterije prema dolje, pažljivo provjerite pozitivne i negativne oznake na poklopcu baterije, umetnite ispravno baterije prema oznakama a zatim ih napunite. Preporučujemo vam da izvadite baterije ako ih koristite dugo vremena (iznad 1 mjeseca).

5.2 Postavke

1. Merna tipka: Usmerite prema objektu koji treba testirati i pritisnite za pokretanje mjerenja
2. Tipka za uključivanje / isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Kliknite za uključivanje / isključivanje pozadinskog osvjetljenja, pritisnite i držite za uključivanje načina mjerenja, a zauzvrat mjerenje temperature tijela.
3. Tipka za uključivanje i isključivanje zvuka: Kliknite za uključivanje / isključivanje zvuka, a dulje pritisnite za prebacivanje između Celzija i Fahrenheita.
4. Down tipka: Provjerite podatke povijesti
5. Gumb Gore: Provjerite podatke iz povijesti

5.3 Mjerenje tjelesne temperature

Termometar stavite u središte položaja čela i držite ga okomitim, držite na udaljenosti od 1-5 cm od čela.

Pritisnite okidač za mjerenje kako će se resut prikazati na zaslonu u roku od 2 sekunde.

a) The body temperature mode je zadani način. Ako izmijenite postavku, prije mjerenja trebate se vratiti u modus tjelesne temperature. Nakon podešavanja prikazuje se zaslon "👤".

b) Pritisnite gumb napajanja za uključivanje i automatsko mjerenje temperature.

c) Bez ikakvog rada, uređaj će se automatski isključiti u roku od 10 sekundi radi uštede energije.

d) Područje mjerenja ne smije biti prekriveno dlakom ili začepljenjem, a ne smije biti ni znoja ni kapi vode.

e) Prije mjerenja izbjegavajte kupanje ili energično vježbanje.

f) Preporučuje se napraviti 3 mjere svaki put. Ako je izmjerena vrijednost različita, odaberite vrijednost s najvišom temperaturom.

g) Izmjereni rezultat ovog uređaja nije zamjena za dijagnozu liječnika, samo za referencu.



① Način mjerenja (Objekat 📦 / Tijelo 👤)

② Memorija


③ Temperaturne jedinice (°C / °F)

④ Podaci o temperaturi

⑤ Upozorenje na tjelesnu temperaturu (Normal / Groznica)

⑥ Vrijednost baterije

⑦ Stanje zvuka (uključen/isključen)

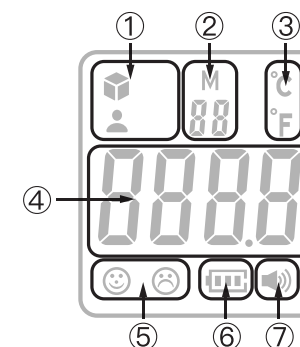

5.4 Mjerenje temperature površina

Prije mjerenja promijenite način rada "Temperatura površine objekta".

Nakon podešavanja prikazat će se zaslon. "📦" Držite udaljenost od 1-5 cm od površine predmeta i držite je okomitu. Pritisnite okidač za mjerenje i rezultat će se prikazati na zaslonu u roku od 2 sekunde. Bez ikakvog rada uređaj će se automatski isključiti u roku od 10 sekundi radi uštede energije.

5.5 Provjera povijesnih podataka

U stanju mjerenja pritisnite lijevu i desnu odabirnu tipku za prikaz povijesnih zapisa. Ako nema zapisa, ne prikazuju se brojevi. Do 32 grupe podataka, podaci će se ciklično prepisati.

6. Kontraindikacije, mjere opreza, upozorenja i savjeti

6.1 Kontraindikacije: Nema

6.2 Mjere opreza

- (1) Ovaj je proizvod u osnovi bez elektromagnetskog zračenja i u skladu je s trenutnim međunarodnim standardima elektromagnetskog zračenja. Da biste postigli elektromagnetske smetnje od druge opreme na proizvodu i utjecali na rezultate ispitivanja, držite se dalje od elektroničke opreme poput mobilnih telefona i indukcijskih peći.
- (2) Prije uporabe pažljivo pročitajte upute, provjerite je li baterija pravilno postavljena.
- (3) Izbjegavajte uranjanje uređaja u tekućinu, a dulje vrijeme je zabranjeno izloženo visokim ili niskim temperaturama.